



**Aus Alt wird Neu –  
Revitalisieren Sie Ihren OP-Tisch**  
Unser Sortiment an OP-Tisch-Polstern

TapMed

Die Qualität der OP-Tisch-Polster spielt für die Patientensicherheit und Hygiene im Operationsaal eine zentrale Rolle. Durch die tägliche Beanspruchung, der Reinigung mit aggressiven Chemikalien oder einer falscher Aufbewahrung, werden die Polster stark in Mitleidenschaft gezogen.

Bevor Sie in teure Neuanschaffungen kompletter Systeme investieren, bieten wir Ihnen eine smarte, wirtschaftliche und nachhaltige Alternative, die den Lebenszyklus Ihrer wertvollen Arbeitsmittel deutlich verlängert.

## Warum ein Austausch Ihrer OP-Polster wichtig ist

### Patientenschutz

Oft sind alte, verschlissene Polster die Ursache für intraoperativen Dekubitus, da sie ihre Rückstellkraft verlieren und keinen Schutz vor gefährlichem „Bottoming-out“ (Durchliegen) bieten. Unsere Premium-Polster mit 80 mm Dicke und viskoelastischem Memory-Schaum passen sich perfekt an und senken das Risiko von Druckgeschwüren.

### Hygiene

Wir setzen auf innovative, ultraschallverschweißte Nähte und flüssigkeitsdichte Polyurethan-Beschichtungen (PU). Das Ergebnis: Eine lückenlose Desinfektion und maximaler Schutz vor nosokomialen Infektionen. Die robuste Beschichtung lässt sich schnell, sicher und rückstandslos desinfizieren – das spart wertvolle Zeit beim Saalwechsel.

### Wirtschaftlichkeit

Ein neuer OP-Tisch ist eine hohe Investition. Mit unseren Polstern steigern Sie Ihren OP-Tisch-Erlös-Index, indem Sie die Lebensdauer Ihrer vorhandenen Infrastruktur drastisch verlängern. Nutzen Sie Ihr Budget dort, wo es wirklich zählt, und sparen Sie durch den Polstertausch bares Geld.

## Wann ist ein Austausch unumgänglich?

Ein Polster sollte ausgetauscht werden, sobald eines der folgenden Anzeichen auftritt:


- Verhärtung oder Verlust der Flexibilität/Elastizität
- Dauerhafte Verformung oder Kuhlenbildung
- Risse, Löcher oder Einstiche im Bezug
- Verfärbungen oder hartnäckige Flecken
- Schwierigkeiten bei der Reinigung/Desinfektion



## Maßgeschneidert für jeden OP-Tisch

Jeder OP-Tisch unterscheidet sich nach Hersteller, Aufbau und Aufteilung der bestehenden Polster. Deshalb bieten wir eine **individuelle Fertigung nach Kundenbedarf** an – exakt nach Ihren Maßen und Anforderungen, direkt aus einer europäischen Manufaktur. Somit ist passgenauer Ersatz für alle OP-Tisch-Hersteller kein Problem. Bestehende Befestigungssysteme passen wir flexibel an.


- +** Unser **Standard-Polster** besteht aus drei verschiedenen Schaumstoffen und deckt **ca. 90 % des täglichen Bedarfs** im OP ab. Für besondere Anforderungen, wie zum Beispiel in der Orthopädie, führen wir vier weitere Schaumstoffkombinationen im Sortiment.
- +** Für Tische mit **fest verbundenen PUR-Platten** haben wir eine Lösung: das vorhandene System wird einfach **gegen HPL-Platten getauscht**, auf denen unsere Polster montiert werden können.
- +** Die **Befestigung** am Tisch erfolgt wahlweise per **Klettverschluss** oder durch das innovative **selbsthaftende Fix@Clean® System**

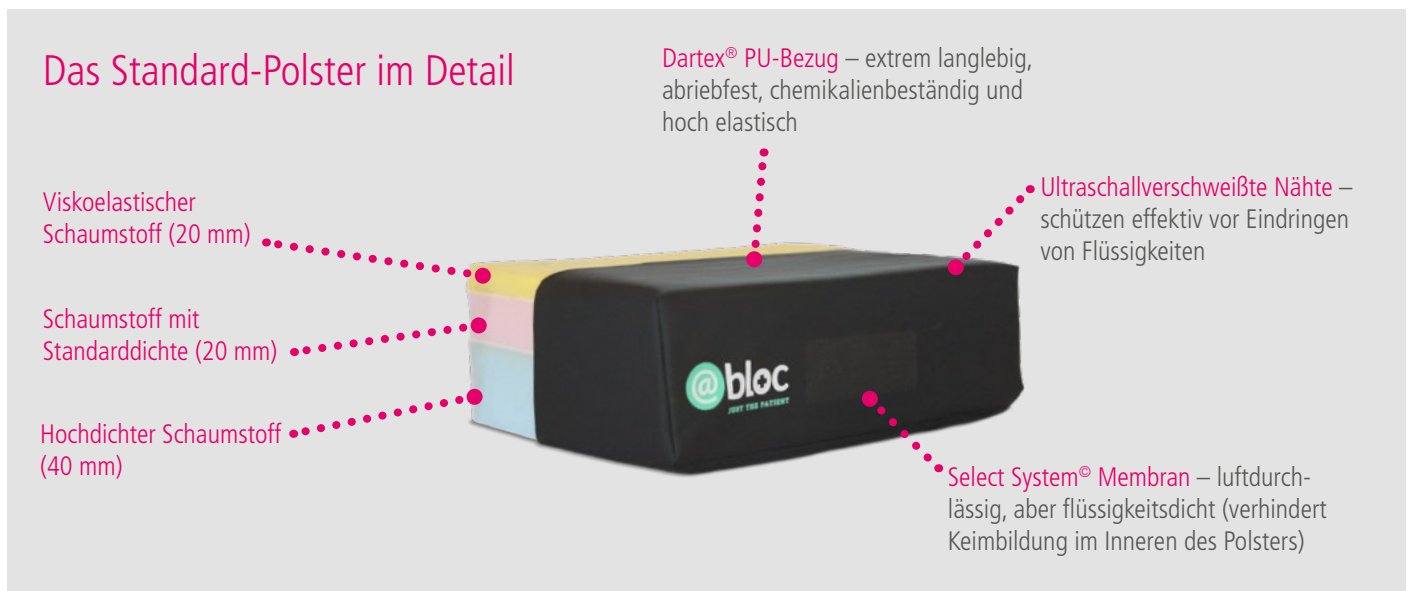

## Eine große Auswahl mit großem Service

Aufgrund der **Vielfältigkeit bestehender OP-Tische** und unserem **großen Angebot an OP-Tisch-Polstern**, steht Ihnen unser **Außendienst** gern zu Verfügung. Vor Ort inspiziert er Ihren Bestand, nimmt Maß und berät Sie hinsichtlich der gewünschten Polster Ausführung.

Verleihen Sie Ihrem OP-Tisch ein modernes Update.

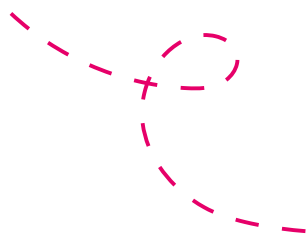

### Kontaktieren Sie uns:

- @ patientenversorgung@tapmed.de
- ☎ 05606 53060-200





# TapMed

Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen

-  [www.tapmed.de](http://www.tapmed.de)
  -  [patientenversorgung@tapmed.de](mailto:patientenversorgung@tapmed.de)
  -  05606 53060-200
  -  [tapmed-medizintechnik-handels-gmbh](https://www.linkedin.com/company/tapmed-medizintechnik-handels-gmbh)
  -  [facebook.com/tapmed.de](https://www.facebook.com/tapmed.de)
  -  [tapmed.de](https://www.instagram.com/tapmed.de)
-