

Bessere Sicht auf Gefäße in der Mikrochirurgie

Silikon-Streifen, Vorderseite mit 1 mm Maß-Gitter, Rückseite glatt.
Erhältlich in den Farben Blau, Grün und Gelb.
Einzel steril verpackt, Lieferung in Boxen zu je 12 Stück.

Anwendung


Bei der Anastomose von Gefäßen in der Mikrochirurgie zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Gefäßen und Details.

Die Hintergrundfolie kann beidseitig verwendet werden. Entweder glatt oder mit der Maßgitterseite zur besseren Größeneinschätzung.



Das Material ist matt zur Vermeidung von Reflexionen und nicht haftend um die Beweglichkeit des Gefäßes zu unterstützen.



Boxen zu je 12 Stück
Steril

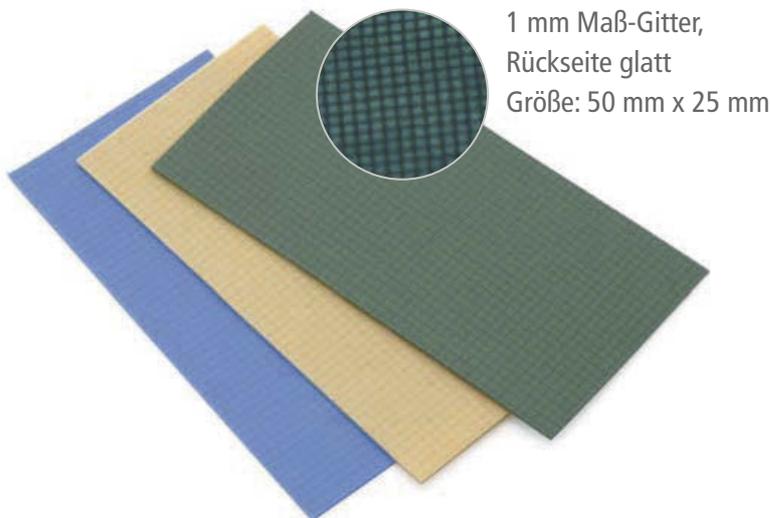

1 mm Maß-Gitter,
Rückseite glatt
Größe: 50 mm x 25 mm

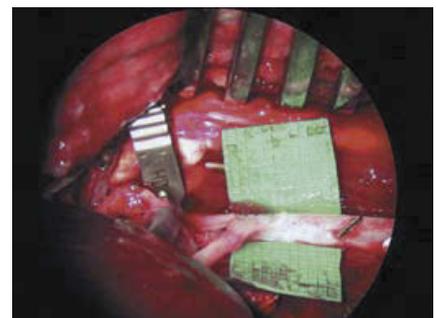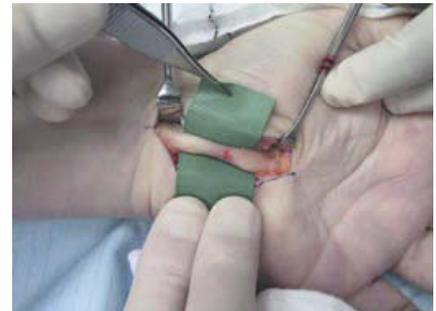

CE
1639

Farbe	Bestellnummer
gelb	VB2
grün	VB3
blau	VB4

- Röntgenstrahlendichtes Silikon
- Maß-Gitter 1 mm
- Latexfrei
- Einzel steril verpackt