

**TapMed** Tiergesundheit

**TapMed**   
Medizintechnik Handels GmbH

# Vorwort



*„Neben der menschlichen, ist die Gesundheit von Tieren das höchste Gut. Wer sich dazu entscheidet, mit Tieren zusammenzuleben, wünscht sich nichts mehr, als ihnen ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen.“*  
Monika Rinne, Geschäftsführerin TapMed.

Seit mehr als 30 Jahren ist die Firma TapMed ein kompetenter Partner im Vertrieb von innovativen und hochwertigen medizintechnischen Produkten für die Humanmedizin. TapMed fungiert als Bindeglied zwischen den Herstellern und Anwendern. Allen Kunden werden ein umfassender Beratungsservice, Produktschulungen und Workshops geboten, um einen detaillierten sowie transparenten Informationsfluss zu ermöglichen.

Diese langjährige Erfahrung und den umfassenden Service möchte die Firma TapMed auch in der Veterinärmedizin weitergeben und hat ihr Portfolio Ende 2019 um den Bereich Tiergesundheit erweitert.

Unter anderem bietet TapMed ein System zum Wundverschluss an, das sogar bei großen Bauch-OPs bei Pferden beste kosmetische Ergebnisse liefert. Für Hüft-TEPs, zum Beispiel bei Hunden oder Katzen, ist eine sichere Lagerung erforderlich. Auch hier gibt es eine optimale Lösung. Ein Vakuumkissen lagert das Tier stabil, der Tierarzt hat optimalen Zugriff. Zur Sicherung des OP-Ergebnisses und zur Unterstützung der Hundehalter zu Hause hat TapMed eine einzigartige Matratze entwickelt. Beste Druckentlastungseigenschaften treffen auf höchste Hygienestandards.

Weitere innovative Medizinprodukte finden Sie in diesem Katalog.

Professionelles Flüssigkeitsmanagement .....	04
Hauthefter mit resorbierbaren Klammern .....	05
Arbeitssicherheit .....	06-09
Sicherheitskanülen und -Spritzen .....	06-07
Produkte für rückschonendes Arbeiten.....	08-09
Lagerungshilfen.....	10-11
Hygienische und orthopädische Hundebetten.....	12-15

DryMax VET 

 SANDEL®

 hospital  
direct

 AZURE

INSORB®



AnubiMed

 SolM Building  
a Healthier  
Tomorrow

OLYMPIC VAC-PAC®



Durch die patentierte Superabsorber-Technologie ist das DryMax VET Super-Saugtuch in der Lage, weitaus größere Mengen Flüssigkeit aufzunehmen als herkömmliche Saugtücher. Wasserbasierte Flüssigkeiten wie Urin, Blut, Fruchtwasser und Spülflüssigkeiten werden im Inneren des Super-Saugtuches sicher gebunden und tropffrei entsorgt.

## DryMax VET Super-Saugtuch 5.0

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 5l

## DryMax VET Super-Saugtuch 2.3

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 2,3l

### Super-Saugtücher

- beidseitig saugfähig
- kontaminierte Flüssigkeiten werden sicher eingeschlossen
- nicht zum Zuschneiden geeignet
- besonders empfehlenswert als Unterlage bei Zahnsanierungen und Arthroskopien sowie in Aufwachboxen



Die Super-Saugtücher bestehen aus hochabsorbierenden gelbildenden Polymeren, umschlossen von einer innovativen Zellstoffhülle.



Die Saugtücher bestehen aus mehreren Lagen hochwertigem, saugfähigem Zellstoff, sowie einer PU-Folie als Auslaufschutz.

### DryMax VET Saugtuch

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 2l

- zum individuellen Zuschneiden geeignet
- Folienrücken zur Verringerung der Rutschgefahr
- nur auf trockenen Flächen platzieren (blaue Seite nach unten)
- besonders empfehlenswert als Unterlage auf dem OP-Tisch sowie als Bodenabdeckung, um die Rutschgefahr der Angestellten zu verringern

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Saugleistung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
F40004	DryMax VET 5.0 Super-Saugtuch	bis zu 5l	72 x 37	50 Stück
F40005	DryMax VET 2.3 Super-Saugtuch	bis zu 2,3l	72 x 37	30 Stück
F40011	DryMax VET Saugtuch	bis zu 2l	100 x 75	50 Stück

# Der neue Standard für den Hautverschluss

## Innovativer Hauthefter für einen schnellen und sicheren Hautverschluss

Verschluss von bis zu 21cm langen Schnitten

Material: 30 resorbierbare Klammern aus PLGA pro sterilem Einmalgerät

### Nickelfreie, resorbierbare Klammern

- keine perkutanen Verletzungen
- bessere und schnellere Wundheilung
- glatte Narben durch Eversion
- selten Wundkomplikationen

### Verkürzte Behandlungsdauer

- geringere Ermüdung der Hand
- keine Verletzungen durch Nadelstiche
- weniger aufwendige Nachbehandlung
- geringerer Einsatz von Anästhetika und Entzündungshemmern

### Verschluss von Inzisionen, z. B. nach

- Kolik-Operationen
- Hüft-Operationen
- Kaiserschnitten
- Richten von Frakturen
- Ovariectomien



postoperativ



5 Wochen postoperativ



8 Wochen postoperativ


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
2030/I	InSORB - subkutikulärer Haut-Hefter	20 x 15 x 21	1 Stück
2030	InSORB - subkutikulärer Haut-Hefter	20 x 15 x 21	Box mit 6 Stück

# Arbeitserleichterung durch einzigartige Sicherheitsmechanismen

## Sicherheitskanülen SOL-CARE™

- komfortable Einhand-Aktivierung des Sicherheitsmechanismus der Kanülenschutzvorrichtung
- ein hörbares „Klick“ bestätigt die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
- durch den patentierten Verriegelungsmechanismus verschwindet die Nadel vollständig und sicher in der Schutzvorrichtung
- kompatibel mit Luer-Slip- und Luer-Lock-Düsen

Alternativ bieten wir auch die qualitativ hochwertigen Standardkanülen an.

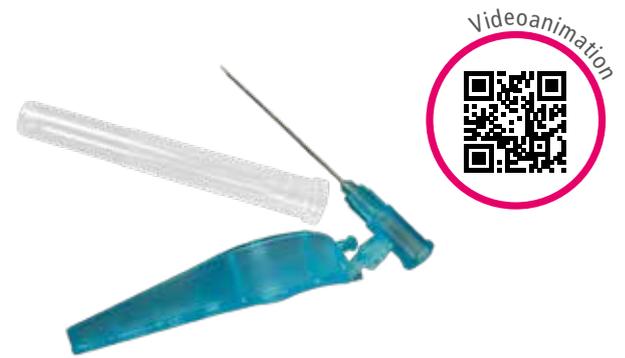

Kanülenschutz herunterdrücken



Hörbares „Klick“ bestätigt Aktivierung



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
SN1815	SOL-CARE Sicherheitskanüle 18G*1 ½"	100 Stück
SN2115	SOL-CARE Sicherheitskanüle 21G*1 ½"	100 Stück
SN22125	SOL-CARE Sicherheitskanüle 22G*1 ¼"	100 Stück
SN2410	SOL-CARE Sicherheitskanüle 24G*1"	100 Stück
111815	SOL-M Standardkanüle 18G*1 ½"	100 Stück
112115	SOL-M Standardkanüle 21G*1 ½"	100 Stück
1122125	SOL-M Standardkanüle 22G*1 ¼"	100 Stück
112410	SOL-M Standardkanüle 24G*1"	100 Stück

## Sicherheitsspritzen mit Luer-Lock-Düse

- manuell zurückziehbare Nadel verhindert Stichverletzungen und Wiederverwendung der Spritze
- Kolben kann nach Gebrauch und Einzug der Nadel abgebrochen werden
- geringes Totraumvolumen durch langen, schmalen Pin am Ende des Kolbens



Alternativ bieten wir auch die qualitativ hochwertigen Standardspritzen mit Luer-Slip-Düse an.



Injektion ausführen, Kolben dabei bis zum „Klick“ runter drücken



Kolben bis zum „Klick“ zurückziehen



Kolben abbrechen



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
120006IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 3 ml	100 Stück
120007IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 5 ml	100 Stück
120008IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 10 ml	100 Stück
1200069IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 20 ml	50 Stück
180011	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 1 ml	100 Stück
180003	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 3 ml	100 Stück
18005ST	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 5 ml	100 Stück
180010ST	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 10 ml	100 Stück

## Anti-Müdigkeits-Matte™

Material: erdölfreies Polyurethan

- innen offenporig, außen geschlossen für herausragende Rückstellfähigkeit
- subtiles Beanspruchen der Beinmuskulatur reduziert Gelenkbelastungen
- beugt Rückenschmerzen und Ermüdung vor
- hellorange für gute Sichtbarkeit
- abgeflachte Kanten verringern Stolpergefahr

## Anwendungsbeispiele

- zum Schutz von Pinguinfüßen in Bruthöhlen
- als Unterlage in Stationsboxen
- zur Entlastung des menschlichen Rückens im klinischen oder häuslichen Umfeld



## Ergo-Step™

- leichte, stabile Tritte aus Kunststoff
- rutschfeste Oberfläche
- gummierte FüÙe
- sicher stapelbar für perfekten Höhenausgleich

## Anwendungsbeispiele

- für den Stehplatz im OP
- für den Einsatz im Stall

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
2317-P-single	Anti-Müdigkeits-Matte, klein	33 x 43 x 1,9	1 Stück
2332-P-single	Anti-Müdigkeits-Matte, mittel	51 x 81 x 1,9	1 Stück
1170-T-single	Ergo-Step™ Tritte - Oberteil	45,7 x 35,6 x 13,5	1 Stück
1170-B-single	Ergo-Step™ Tritte - Unterteil	45,7 x 35,6 x 13,5	1 Stück

# Slideezi® – Rückenschonendes Umlagern mit dem besonders strapazierfähigen Gleittuch

## Sicheres und einfaches Umlagern von großen Tieren

Material: Öko-zertifiziertes, latexfreies und reißfestes Gewebe

Mit dem Slideezi® Gleittuch lassen sich auch große und schwere Tiere durch sanftes Gleiten mit minimalem Kraftaufwand umlagern. Der Patient ist währenddessen vor ungewolltem Rutschen zu sichern. Das Gleittuch hilft, Scherkräfte beim Umlagern von Patienten zu vermeiden.

### Vielseitig und flexibel

- reißfest
- latexfrei
- röntgenstrahlendurchlässig
- hervorragende Gleitfähigkeit
- einfaches Umlagern
- sicheres Repositionieren

### Produktanwendung

Das Slideezi® Gleittuch wird mittig gefaltet, sodass es doppelt liegt und auf sich selbst gleiten kann. Für eine größere Auflagefläche können auch zwei Tücher übereinander gelegt werden.

### **NEU** Slideezi® mit Griffen

waschbar und wiederverwendbar

- mit praktischen Griffen für noch leichteres Umlagern
- waschbar bei 40 - 74 °C
- bei niedriger Temperatur trocknergeeignet



Art.-Nr.: DFS70200X50SP | Slideezi® als patientenbezogenes Einmalprodukt



Art.-Nr.: SMS90200SP | Slideezi® als waschbares, wiederverwendbares Gleittuch

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
DFS70200X50SP	Slideezi® - Gleittuch, Einmalprodukt	70 x 200 cm	25 Stück
SMS90200SP	Slideezi® - Gleittuch, wiederverwendbar	70 x 200 cm	1 Stück

# Sichere Lagerungshilfe zum Schutz vor Nervenschädigungen und Druckgeschwüren bei Kleintieren



## AZURE 400 VET

### Lagerungshilfe für Kleintiere in Rückenlage

Material: Silikongel, umhüllt von robuster, lösemittelfester PU-Folie

- kann im Inkubator, Backofen oder auf der Heizung auf Körpertemperatur vorgewärmt werden
- vergrößerte Auflagefläche begünstigt Blutzirkulation
- formbeständig
- wiederverwendbar
- abwaschbar und desinfizierbar
- Gel läuft bei Beschädigung nicht aus



Kastration – Kaninchen in Rückenlage

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in mm)	Stückzahl je VE
AZURE 400 VET	AZURE Lagerungshilfe für Kleintiere	515 x 180 x 40 mm	1 Stück

# Die superflexible Vakuum-Matte

## Die Lösung für sichere und stabile Lagerung

Vac-Pac ist eine Vakuum-Matte, die sich an das Tier anlegt und es bei Operationen und anderen Eingriffen sicher in einer festen Position hält. Vac-Pac ist mit festen, winzig kleinen Polystyrolkugeln gefüllt. Die Kugeln haben verschiedene Größen und bilden so eine besonders gut formbare Masse, sobald die Luft aus der Matte abgesaugt wird. Durch das individuelle Anpassen an den Patienten entsteht eine druckentlastende Vergrößerung der Auflagefläche.



Vac-Pac Form 31  
51631 | 90 x 98 cm



Vac-Pac Form 31  
51631 | 90 x 98 cm

## Sicher, einfach und universell

- sichere Lagerung
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- latexfrei
- nicht leitend
- röntgenstrahlendurchlässig

## Anwendungsbeispiele

- unkomplizierte und individuelle Lagerung im OP
- Sicherung des Patienten beim Transport
- Ruhigstellen von Frakturen

Artikel-Nr.	Größe (in cm)	Form
51611	41 x 30	
51623	51 x 46	
51630	90 x 73	
51631	90 x 98	
51632	90 x 118	
51635	71 x 88	
51640	193 x 76	

# Das hygienische Hundebett

Einzigartig · Orthopädisch · Gesund



## Das hygienische Hundebett mit dem besonderen PneumaPure®-Filter



**PneumaPure®-Filter**  
Der integrierte, nanoporige PneumaPure®-Filter sorgt für Luftaustausch und verhindert mit seiner geringen Porengröße gleichzeitig das Eindringen von Flüssigkeiten, Krankheitserregern und Parasiten.

**Verschweißte Nähte**  
Die äußerst strapazierfähige Polyurethanhülle ist nicht vernäht sondern an den Rändern verschweißt. So entsteht ein wasserdichter Bezug rund um den Memory Schaum, der abwasch- und desinfizierbar ist.

**Memory Schaum**  
Besonders hochwertiger und langlebiger Memory Schaum sorgt für außergewöhnlichen Liegekomfort, da er die Gelenke entlastet und nach kurzer Zeit die Körpertemperatur des Hundes annimmt.

## Erhältlich in fünf verschiedenen Größen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)
3012012	AnubiMed Hundebett S inkl. Bezug	45 x 65 x 8 cm
3012035	AnubiMed Hundebett M inkl. Bezug	65 x 90 x 9 cm
3012096	AnubiMed Hundebett L inkl. Bezug	70 x 110 x 11 cm
3012097	AnubiMed Hundebett L+ inkl. Bezug	80 x 120 x 12 cm
3010042	AnubiMed Hundebett XL+ inkl. Bezug	95 x 135 x 12 cm

Alle Matratzen und Bezüge sind auch einzeln erhältlich.





### Das Platzsparende - Größe S

**Größe:** 45 x 65 x 8 cm  
**Füllung:** Memory Schaum – 50kg/m<sup>3</sup>  
**Rassen:** Chihuahua bis Mops

### Das Praktische - Größe M

**Größe:** 65 x 90 x 9 cm  
**Füllung:** Memory Schaum – 50kg/m<sup>3</sup>  
**Rassen:** Beagle bis Border Collie

### Das Komfortable - Größe L

**Größe:** 70 x 110 x 11 cm  
**Füllung:** Memory Schaum – 50kg/m<sup>3</sup>  
**Rassen:** Malinois bis Golden Retriever



### Das Besondere - Größe L+

**Größe:** 80 x 120 x 12 cm  
**Füllung:** Memory Schaum – 50kg/m<sup>3</sup>  
 + Komfortschaum – 40kg/m<sup>3</sup>  
**Rassen:** Deutscher Schäferhund bis Rottweiler

### Das Luxuriöse - Größe XL+

**Größe:** 95 x 135 x 12 cm  
**Füllung:** Memory Schaum – 50kg/m<sup>3</sup>  
 + Komfortschaum – 40kg/m<sup>3</sup>  
**Rassen:** Cane Corso bis deutsche Dogge



## Passend dazu: handgenähte Textilbezüge

Jeder Stoff wird von uns persönlich ausgewählt und getestet.

Unsere Kriterien:

- bei 40°C maschinenwaschbar
- kratz- und bissfest\*
- weich und bequem

Die hochwertigen Bezüge werden in Deutschland in liebevoller Handarbeit in der Schneiderei der **bcks** WELFALT LEBEN – Baunataler Diakonie Kassel e.V. von Menschen mit und ohne Handicap gefertigt.



Weitere Stoffe und Farben auf Anfrage;  
 Farben können vom Bild abweichen.

\*Angabe ohne Gewähr. Strapazierfähigkeit variiert von Stoff zu Stoff und hängt von der Dauer der Belastung sowie von der individuellen Schärfe der Zähne und Krallen des Tieres ab.

## Einsatzgebiete der orthopädischen Matratze

### Druckentlastende und super saubere Unterlage für die Tiergesundheit

Um den Patienten bestmögliche Heilungschancen zu gewährleisten, brauchen sie im Anschluss eines chirurgischen Eingriffs viel Ruhe und einen gesunden Schlafplatz. Orthopädische AnubiMed Matratzen eignen sich besonders als Liegeplatz in der Tiermedizin. Der hochwertige Memory Schaum entlastet die Gelenke, isoliert vor Bodenkälte und nimmt die körpereigene Temperatur an. Die Hülle ist dicht, abwaschbar und leicht zu desinfizieren. Auf Wunsch sind passende hochwertige Bezüge erhältlich.



Max erholt sich auf AnubiMed Größe M mit orangem Bezug von seiner Kastration.

### Anwendungsbeispiele

- auf dem Ultraschalltisch
- auf dem OP Tisch
- in Stationsboxen
- für das Wartezimmer
- für Patientenbesitzer zu Hause

### AnubiMed für kleine Pferde

Als Fohlenbett ist die AnubiMed Matratze bereits erfolgreich im Einsatz. Besonders überlebensschwachen Fohlen bietet die Matratze besten Schutz und Liegekomfort. Auch für Ponys ist die AnubiMed Matratze geeignet.



Hier entspannt das Mini-Shetland-Pony Bounty auf der größten AnubiMed Matratze Größe XL+.



Die Katzendame Marley zieht die AnubiMed Matratze Größe S der Couch vor.

## AnubiMed bei Inkontinenz


Die AnubiMed Matratzen in Größe S sind bei Katzen sehr beliebt. Vor allem für ältere inkontinente Tiere ist AnubiMed zu empfehlen. Die Matratze nimmt den intensiven Geruch von Katzenurin nicht an. Sie lässt sich einfach abwaschen und desinfizieren. Die weichen, waschbaren Veloursbezüge schmeicheln den Samtpfoten besonders.

## AnubiMed – Eine Matratze, viele Ideen

Ob zur Dekubitusprophylaxe bei Schweinen, als OP-Unterlage bei Alpakas oder zur Dämmung im Terrarium, die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Sie haben weitere Ideen für die einzigartige orthopädische AnubiMed Matratze? Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Um mit uns direkt in Kontakt zu treten, scannen Sie einfach diesen QR Code oder rufen Sie an: +49 (0) 5606 53060-0!



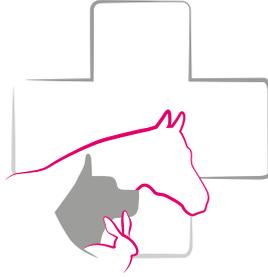

## Wir beraten Sie gerne!

☎ Tel. +49 (0) 5606 53060-0

✉ [tiergesundheits@tapmed.de](mailto:tiergesundheits@tapmed.de)



**TapMed**   
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen  
[www.tapmed.de](http://www.tapmed.de) · [info@tapmed.de](mailto:info@tapmed.de)

 Online-Shop: [www.anubimed.de](http://www.anubimed.de)

 Instagram: [anubimed.by.tapmed](https://www.instagram.com/anubimed.by.tapmed)