

TapMed Tiergesundheit

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH



*„Neben der menschlichen, ist die Gesundheit von Tieren das höchste Gut. Wer sich dazu entscheidet, mit Tieren zusammenzuleben, wünscht sich nichts mehr, als ihnen ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen.“
Monika Rinne, Geschäftsführerin TapMed.*

Seit mehr als 30 Jahren ist die Firma TapMed ein kompetenter Partner im Vertrieb von innovativen und hochwertigen medizintechnischen Produkten für die Humanmedizin. TapMed fungiert als Bindeglied zwischen den Herstellern und Anwendern. Allen Kunden werden ein umfassender Beratungsservice, Produktschulungen und Workshops geboten, um einen detaillierten sowie transparenten Informationsfluss zu ermöglichen.

Diese langjährige Erfahrung und den umfassenden Service möchte die Firma TapMed auch in der Veterinärmedizin weitergeben und hat ihr Portfolio Ende 2019 um den Bereich Tiergesundheit erweitert.

Unter anderem bietet TapMed ein System zum Wundverschluss an, das sogar bei großen Bauch-OPs bei Pferden beste kosmetische Ergebnisse liefert. Für Hüft-TEPs, zum Beispiel bei Hunden oder Katzen, ist eine sichere Lagerung erforderlich. Auch hier gibt es eine optimale Lösung. Ein Vakuumkissen lagert das Tier stabil, der Tierarzt hat optimalen Zugriff. Zur Sicherung des OP-Ergebnisses und zur Unterstützung der Hundehalter zu Hause hat TapMed eine einzigartige Matratze entwickelt. Beste Druckentlastungseigenschaften treffen auf höchste Hygienestandards.

Weitere innovative Medizinprodukte finden Sie in dieser Broschüre.

Professionelles Flüssigkeitsmanagement	04
Retraktoren inkl. LED-Lichtquelle	05
Hauthefter mit resorbierbaren Klammern	06
Arbeitssicherheit	07-11
Sicherheitsspritzen.....	07
Produkte für rückschonendes Arbeiten.....	08-09
Sicherheitsskalpelle	10-11
Lagerungshilfen.....	12-13
Hygienische und orthopädische Hundebetten.....	14-15

DryMax VET 

SANDEL® 

 **hospital direct**

 **obp**
simple, bright ideas.

 **ISO**
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION

 **INSORB**®


AnubiMed

 **SOL-MILLENNIUM**®
Building a Healthier Tomorrow

 **AZURE**

OLYMPIC VAC-PAC®



Durch die patentierte Superabsorber-Technologie ist das DryMax VET Super-Saugtuch in der Lage, weitaus größere Mengen Flüssigkeit aufzunehmen als herkömmliche Saugtücher. Wasserbasierte Flüssigkeiten wie Urin, Blut, Fruchtwasser und Spülflüssigkeiten werden im Inneren des Super-Saugtuches sicher gebunden und tropffrei entsorgt.

DryMax VET Super-Saugtuch 5.0

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 5l

DryMax VET Super-Saugtuch 2.3

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 2,3l

Super-Saugtücher:

- beidseitig saugfähig
- kontaminierte Flüssigkeiten werden sicher eingeschlossen
- nicht zum Zuschneiden geeignet
- besonders empfehlenswert als Unterlage bei Zahnsanierungen und Arthroskopien sowie in Aufwachboxen



Die Super-Saugtücher bestehen aus hochabsorbierenden gelbildenden Polymeren, umschlossen von einer innovativen Zellstoffhülle.



Die Saugtücher bestehen aus mehreren Lagen hochwertigem, saugfähigem Zellstoff, sowie einer PU-Folie als Auslaufschutz.

DryMax VET Saugtuch

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 2l

- zum individuellen Zuschneiden geeignet
- Folienrücken zur Verringerung der Rutschgefahr
- nur auf trockenen Flächen platzieren (blaue Seite nach unten)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Saugleistung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
F40004	DryMax VET 5.0 Super-Saugtuch	bis zu 5 l	72 x 37	50 Stück
F40005	DryMax VET 2.3 Super-Saugtuch	bis zu 2,3 l	72 x 37	30 Stück
F40011	DryMax VET Saugtuch	bis zu 2 l	100 x 75	50 Stück

Die ersten Einmalretraktoren mit integrierter kabelloser LED-Lichtquelle

ONETRAC XS schmal

Material: verstärktes ultraleichtes Nylon

Der ultraleichte, sehr robuste Retraktor liegt gut in der Hand und sorgt für perfekte Sicht. Er eignet sich zum Beispiel zum Aufspannen des Rachens bei Kleintieren, sowie zum Ausleuchten kleiner Körperöffnungen sowie Inzisionen.

- **integrierte LED-Lichtquelle, Lebensdauer 90+ Minuten**
- steriles Einmalprodukt
- reduziert das Risiko der Kreuzkontamination
- aufwendige Reinigung und Sterilisation entfällt
- einfache Handhabung
- keine weiteren Komponenten nötig



*Weitere Formate/Größen inkl. Absauganschluss erhältlich



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in mm)	Stückzahl je VE
C100170	ONETRAC Einmalretraktor, steril	55 x 8 mm	Box mit 5 Stück

Innovativer Hauthefter für einen schnellen und sicheren Hautverschluss


Verschluss von bis zu 21cm langen Schnitten

Material: 30 resorbierbare Klammern aus PLGA pro sterilem Einmalgerät



nickelfreie, resorbierbare Klammern

- keine perkutanen Verletzungen
- bessere und schnellere Wundheilung
- glatte Narben durch Eversion
- selten Wundkomplikationen

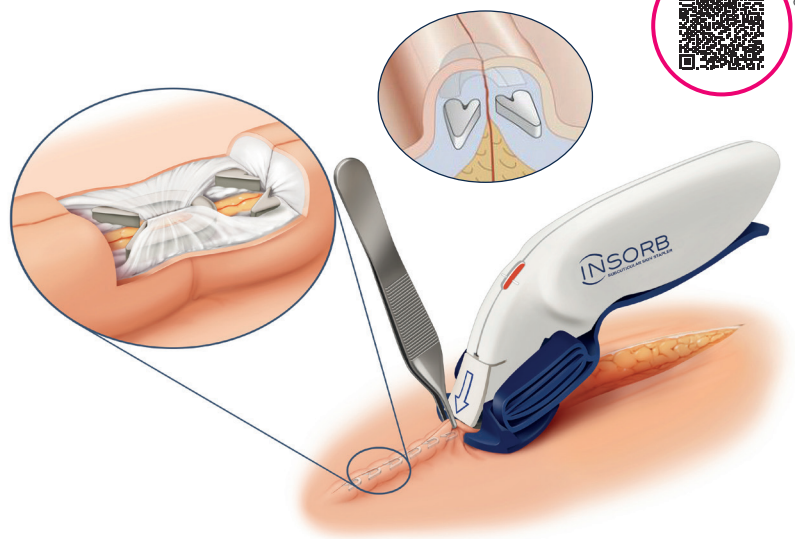

verkürzte Behandlungsdauer

- geringere Ermüdung der Hand
- keine Verletzungen durch Nadelstiche
- weniger aufwendige Nachbehandlung
- geringerer Einsatz von Anästhetika und Entzündungshemmern

Verschluss von Inzisionen, z. B. nach:

- Kolik-Operationen
- Hüft-Operationen
- Kaiserschnitten
- Richten von Frakturen
- Ovariektomien



postoperativ



5 Wochen postoperativ



8 Wochen postoperativ

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
2030/I	InSORB - subkutikulärer Haut-Hefter	20 x 15 x 21	1 Stück
2030	InSORB - subkutikulärer Haut-Hefter	20 x 15 x 21	Box mit 6 Stück

Sicherheitsspritzen mit Luer-Lock

Die Sicherheitsspritze mit Luer-Lock-Düse und manuell zurückziehbarer Nadel verhindert Nadelstichverletzungen und Wiederverwendung der Spritze. Für noch mehr Sicherheit kann der Kolben nach Gebrauch und Einzug der Nadel abgebrochen werden. Durch einen langen schmalen Pin am Ende des Kolbens überzeugt die Sicherheitsspritze zusätzlich mit extrem geringem Totraumvolumen.


Alternativ bieten wir auch die qualitativ hochwertigen Standardspritzen mit Luer-Slip-Düse an.



Sicherheitsspritze mit Luer-Lock-Düse



Standardspritze mit Luer-Slip-Düse

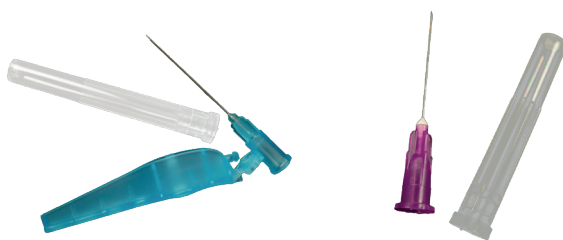

Sicherheitskanüle

Standardkanüle


Sicherheitskanülen SOL-CARE™

- komfortable Einhand-Aktivierung des Sicherheitsmechanismus der Kanülenschutzvorrichtung
- ein hörbares Klicken bestätigt die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
- durch den patentierten Verriegelungsmechanismus verschwindet die Nadel vollständig und sicher in der Schutzvorrichtung
- kompatibel mit Luer-Slip und Luer-Lock-Düsen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
12000 6/7/8/9IM	SOL-CARE 3/5/10/20ml Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle	100 Stück
1800 11/03/5ST/10ST	SOL-M 1/3/5/10ml Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle	100 Stück
SN1815	SOL-CARE Sicherheitskanüle 18G*1 1/2"	100 Stück
SN2115	SOL-CARE Sicherheitskanüle 21G*1 1/2"	100 Stück
SN22125	SOL-CARE Sicherheitskanüle 22G*1 1/4"	100 Stück
SN2410	SOL-CARE Sicherheitskanüle 24G*1"	100 Stück
111815	SOL-M Standardkanüle 18G*1 1/2"	100 Stück
112115	SOL-M Standardkanüle 21G*1 1/2"	100 Stück
1122125	SOL-M Standardkanüle 22G*1 1/4"	100 Stück
112410	SOL-M Standardkanüle 24G*1"	100 Stück

Anti-Müdigkeits-Matte™

- hellorange für gute Sichtbarkeit
- flache Kanten
- subtiles Beanspruchen der Beinmuskulatur reduziert Gelenkbelastungen
- flexibler, gut rückbildender Schaumstoff beugt Rückenschmerzen vor

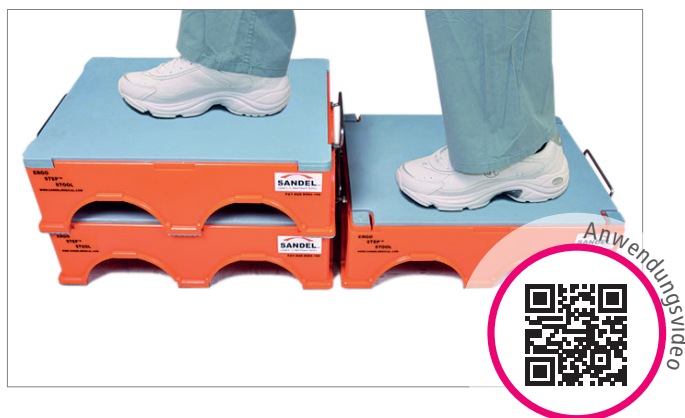

Ergo-Step™

- leichte, stabile Tritte aus Kunststoff
- rutschfeste Oberfläche
- gummierte FüÙe
- sicher stapelbar für perfekten Höhenausgleich

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
2317-P	Anti-Müdigkeits-Matte, klein	33 x 43 x 1,9	5 Stück
2332-P	Anti-Müdigkeits-Matte, mittel	51 x 81 x 1,9	4 Stück
1170	Ergo-Step™ Tritte	45,7 x 35,6 x 13,5	4 Stück

Slideezi® – Rückenschonendes Umlagern mit dem besonders strapazierfähigen Gleittuch

Sicheres und einfaches Umlagern von großen Tieren

Material: Öko-zertifiziertes, latexfreies und reißfestes Gewebe

Mit dem Slideezi® Gleittuch lassen sich auch große und schwere Tiere durch sanftes Gleiten mit minimalem Kraftaufwand umlagern. Der Patient ist währenddessen vor ungewolltem Rutschen zu sichern. Das Gleittuch hilft, Scherkräfte beim Umlagern von Patienten zu vermeiden.

vielseitig und flexibel

- reißfest
- latexfrei
- röntgenstrahlendurchlässig
- hervorragende Gleitfähigkeit
- einfaches Umlagern
- sicheres Repositionieren

Produktanwendung

Das Slideezi® Gleittuch wird mittig gefaltet, sodass es doppelt liegt und auf sich selbst gleiten kann. Für eine noch größere Auflagefläche können auch zwei Tücher übereinander gelegt werden.



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
DFS70200X50SP	Slideezi® - Gleittuch	70 x 200 cm	50 Stück

Skalpelle und Klingen

Material, Schliff und Stabilität machen den Unterschied

Alle Klingen des HSO-Sortiments sind aus Schwedenstahl gefertigt. Der spezielle Open Edge Schliff macht sie im Unterschied zu herkömmlichen Klingen deutlich haltbarer und länger einsetzbar (gem. Razor Edge Sharpness Test).

Die HERKULES-Klingen haben einen verstärkten Rücken und sind damit stabiler und bruchsicherer, was besonders bei festen Strukturen ideal ist.

Passende Mehrweg-Skalpellgriffe, aus Schwedenstahl mit Teflonbeschichtung, finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Der ZEUS-Sicherheitskalpellgriff (gem. Richtlinie Nadelstich-Verordnung 2010/32/EU) verfügt über einen Metallschutzschieber, der das Verletzungsrisiko minimiert.

Für den schnellen Einsatz runden Einweg-Sicherheits-Skalpelle, mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff und metrischer Skalierung, das Sortiment ab. Diese Einweg-Skalpelle verfügen zudem über eine einziehbare Schutzhülle.



Einweg-Sicherheits-Komplettsysteme

- Klinge aus Schwedenstahl
- einziehbare Schutzhülle
- ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit metrischer Skalierung
- steril und latexfrei

Mehrweg-Sicherheits-Skalpellgriffe

- Griff aus Schwedenstahl mit Teflonbeschichtung
- wiederverwendbar nach Sterilisation
- Metallschutzschieber unbeschichtet
- kontaktfreie Skalpellklingentfernung durch Hebel im Metallschutzschieber



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
HSOSS + Klingen-Nr.	Einweg-Sicherheits-Skalpell erhältlich mit den Klingen 10,11, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und als Safety-Stitch Cutter	10 Stück
HEISSG + Größe	Teflon Sicherheits-Skalpellgriff erhältlich in den Größen 3, 3L, 4, 4L	5 Stück

HERKULES-Klingen

- aus Karbonstahl gefertigt
- stabiler und bruchsicherer durch verstärkten Rücken
- Anwendung z.B. bei Sectio von Rindern
- erhältlich für Skalpellgriffe N°3 / N°4, steril

N°3



N°4



Standardklingen

- aus Karbonstahl gefertigt, für den Einmalgebrauch
- erhältlich für Skalpellgriffe N°3 / N°4, steril

N°3



N°4



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
HEIKH + Klingen-Nr.	Herkules Klingen in den oben abgebildeten Figuren erhältlich	100 Stück
HEIK + Klingen-Nr.	Standardklingen in den oben abgebildeten Figuren erhältlich	100 Stück

AZURE 400 VET

Lagerungshilfe für Kleintiere in Rückenlage

Material: Silikongel, umhüllt von robuster, lösemittelfester PU-Folie

- kann im Inkubator auf Körpertemperatur vorgewärmt werden
- vergrößerte Auflagefläche begünstigt Blutzirkulation
- formbeständig
- wiederverwendbar
- abwaschbar und desinfizierbar
- Gel läuft bei Beschädigung nicht aus



*Kastration
Kaninchen in Rückenlage*

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in mm)	Stückzahl je VE
AZURE 400 VET	AZURE Lagerungshilfe für Kleintiere	515 x 180 x 40 mm	1 Stück

Die Lösung für sichere und stabile Lagerung

Vac-Pac ist eine Vakuum-Matte, die sich an das Tier anlegt und es bei Operationen und anderen Eingriffen sicher in einer festen Position hält. Vac-Pac ist mit festen, winzig kleinen Polystyrolkugeln gefüllt. Die Kugeln haben verschiedene Größen und bilden so eine besonders gut formbare Masse, sobald die Luft aus der Matte abgesaugt wird. Durch das individuelle Anpassen an den Patienten entsteht eine druckentlastende Vergrößerung der Auflagefläche.










Vac-Pac Form 31
51631 | 90 x 98 cm

- sichere Lagerung
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar

- latexfrei
- nicht leitend
- röntgenstrahlendurchlässig

Sicher | Einfach | Universell

- unkomplizierte und individuelle Lagerung im OP
- Sicherung des Patienten beim Transport
- Ruhigstellen von Frakturen

Artikel-Nr.	Größe (in cm)	Form
51611	41 x 30	
51623	51 x 46	
51630	90 x 73	
51631	90 x 98	
51632	90 x 118	
51635	71 x 88	
51640	193 x 76	

Das hygienische Hundebett

Einzigartig · Orthopädisch · Gesund



Das hygienische Hundebett mit dem besonderen PneumaPure™-Filter


Das einzigartige virensichere Hundebett AnubiMed kommt in Kliniken und Praxen genauso zum Einsatz, wie in heimischen Wohnzimmern. Der besonders hochwertige und langlebige Memory Schaum sorgt für außergewöhnlichen Liegekomfort, da er die Gelenke entlastet und nach kurzer Zeit die Körpertemperatur des Hundes annimmt. Der integrierte, nanoporige PneumaPure™-Filter entlastet allergiegeplagte Tiere. Der Filter sowie die robuste und undurchlässige PU-Hülle sind abwasch- und desinfizierbar.




Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)
3012012-S	AnubiMed Hundebett S inkl. Bezug	45 x 65 x 8 cm
3012035-M	AnubiMed Hundebett M inkl. Bezug	65 x 90 x 9 cm
3012096-L	AnubiMed Hundebett L inkl. Bezug	70 x 110 x 11 cm
3012097-L+	AnubiMed Hundebett L+ inkl. Bezug	80 x 120 x 13 cm
3010042-XL+	AnubiMed Hundebett XL+ inkl. Bezug	95 x 135 x 12 cm




Alle Matratzen und Bezüge sind auch einzeln erhältlich.

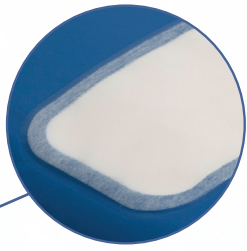

Um den Luftaustausch zu ermöglichen, ist ein Filter mit der speziellen PneuMaPure™-Technologie in die Hülle eingelassen. Dieser Filter ist mit der Hülle verschweißt und ist so feinporig, dass ihn ausschließlich reine Luft passieren kann. Studien belegen, dass der PneuMaPure™-Filter Pathogene der Größe von Viren (oder größer) mechanisch filtert und diese daher nicht in die Matraze eindringen können.

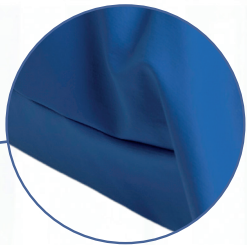

Die äußerst strapazierfähige Polyurethanhülle ist nicht vernäht sondern an den Rändern verschweißt. So entsteht ein wasserdichter Bezug rund um den Memory Schaum.

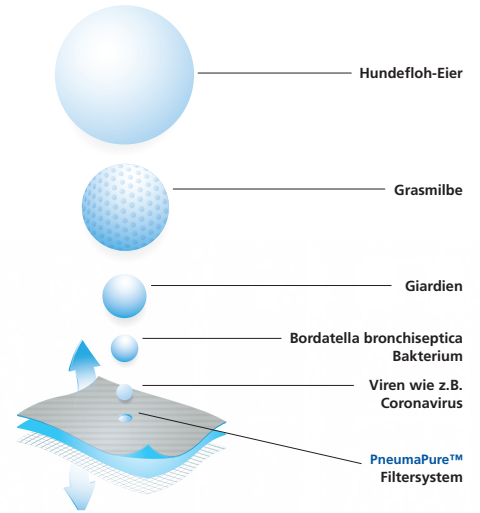

Passend dazu: handgenähte Textilbezüge

Jeder Stoff wird von uns persönlich ausgewählt und getestet.

Unsere Kriterien:


- bei min. 40°C maschinenwaschbar
- kratz- und bissfest*
- weich und bequem

Die hochwertigen Bezüge werden in Deutschland in liebevoller Handarbeit in der Schneiderei der **bcks** WIELFALT LEBEN – Baunataler Diakonie Kassel e.V. von Menschen mit und ohne Handicap gefertigt.



Weitere Stoffe und Farben auf Anfrage; Farben können vom Bild abweichen.

*Angabe ohne Gewähr. Strapazierfähigkeit variiert von Stoff zu Stoff und hängt von der Dauer der Belastung sowie von der individuellen Schärfe der Zähne und Krallen des Tieres ab.

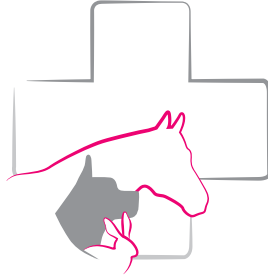

**Ihre Ansprechpartner für die Abteilung Tiergesundheit.
Wir beraten Sie gerne!**




Beate Nickolai


Tel. +49 (0) 5606 53060-0
beate.nickolai@tapmed.de



TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen
www.tapmed.de · info@tapmed.de

 Online-Shop: www.anubimed.de

 Instagram: [anubimed.by.tapmed](https://www.instagram.com/anubimed.by.tapmed)