



DryMax® Super-Saugtücher

 Absorbest

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

DryMax®, das superabsorbierende Saugtuch zur Aufnahme wässriger Flüssigkeiten.

DryMax® schließt Flüssigkeiten sicher und hygienisch ein, ohne zu tropfen. Hochabsorbierende Polymere, umschlossen von einer innovativen Cellulosehülle, bieten bei DryMax® 2.4, DryMax® Triple und DryMax® CombiMat die einfache, preiswerte und effektive Methode, um wässrige Flüssigkeiten hygienisch und sicher aufzunehmen.

DryMax® STERIL – das supersaugfähige Tuch ist als Patientenunterlage klassifiziert. Das Tuch kann für eine sichere und trockene Arbeitsumgebung auf dem OP-Tisch sorgen und mittels Klebestreifen direkt am OP-Feld befestigt werden. Für eine verbesserte Hygiene und Infektionskontrolle sind die unterschiedlichen Varianten der DryMax® Super-Saugtücher kombinierbar.


DryMax® 2.4



DryMax® 2.4 ist ein beidseitig superabsorbierendes Saugtuch für Operationsräume. Es kann unter dem Operationstisch, vor oder neben den Füßen des chirurgischen Teams platziert werden.

Dieses Super-Saugtuch kann große Mengen an Flüssigkeit absorbieren: bis zu 9 Liter Wasser oder 3,5 Liter Kochsalzlösung. Während der Absorption bindet das Granulat im Inneren des Tuches Flüssigkeiten zu Gel.

DryMax® 2.4 hilft das Risiko einer Kontamination zu reduzieren.

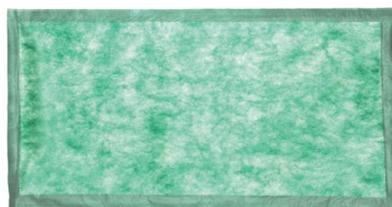

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F20241-100	DryMax® 2.4 - Super-Saugtuch	720 x 370	100 Stück
F20241	DryMax® 2.4 - Super-Saugtuch	720 x 370	100 Stück (4x25)

DryMax® Triple



DryMax® TRIPLE ist ein aus drei Segmenten verbundenes, beidseitig superabsorbierendes Saugtuch. Es kann verschiedenartig zusammen-, oder auseinandergefaltet, sowie entlang des Operationstisches platziert werden. DryMax® TRIPLE ist vor oder neben den Füßen des Operationsteams positionierbar. Während der Absorption bindet das Granulat im Inneren des Tuches Flüssigkeiten zu Gel.

Dieses Super-Saugtuch bindet bis zu 15 Liter Wasser oder 6 Liter Kochsalzlösung.

DryMax® TRIPLE hilft das Risiko einer Kontamination zu reduzieren.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F20243	DryMax® Triple - Super-Saugtuch	2160 x 370	40 Stück

DryMax® XL



DryMax® XL eignet sich, um schnell und effizient Wasser, Spülflüssigkeit, Blut, Urin und andere in Untersuchungs- und Operationsräumen auftretende Flüssigkeiten aufzunehmen. Der Einsatz unter dem Spülbeckenbereich ist ideal.

Das saugstarke Tuch ist auf trockenem Boden zu verwenden. Die Anti-Rutsch-Sperrschicht des Tuches hilft Durchsickern von Flüssigkeiten zu verhindern.

DryMax® ist zuschneid- und begehbar und kann im normalen Krankenhausmüll entsorgt werden. Das Tuch kann bis zu 2 Liter Wasser oder 2 Liter Kochsalzlösung aufnehmen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F22201	DryMax® XL - Saugstarkes Tuch	1000 x 750	50 Stück (5x10)

DryMax® CombiMat



DryMax® CombiMat wurde für ein besseres und trockeneres Arbeitsumfeld in Untersuchungs- und Operationsräumen entwickelt. Der weiße, absorbierende Bereich ist begehbar.

Das Super-Saugtuch ist auf trockenem Boden zu verwenden. Die Anti-Rutsch-Sperrschicht des Tuches hilft Durchsickern von Flüssigkeiten zu verhindern.

DryMax® CombiMat kann große Mengen an Flüssigkeit absorbieren: bis zu 15 Liter Wasser oder 7 Liter Kochsalzlösung. Während der Absorption bindet das Granulat im Inneren des grünen Tuchbereiches Flüssigkeiten zu Gel.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F22202	DryMax® CombiMat - Super-Saugtuch	1100 x 1000	30 Stück

DryMax® STERIL



Die DryMax® STERIL-Saugtücher schließen große Mengen an Flüssigkeit wie Kochsalzlösung, Urin, Fruchtwasser und Blut ohne zu Tropfen ein.

Die Tücher können auf Untersuchungs- und Operationstischen verwendet werden und sind beidseitig saugfähig.

Die Tücher gibt es in zwei Größen mit und ohne Klebestreifen zur Befestigung am OP-Feld.

DryMax® STERIL hilft das Risiko einer Kontamination zu reduzieren.

Auf diese Weise tragen die Tücher zur Infektionskontrolle und Patientensicherheit direkt am OP-Feld bei.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F50241	DryMax® STERIL Maxi Saugleistung: Bis zu 6 l Wasser oder 2,4 l Kochsalzlösung	720 x 370	80 Stück (2x40)
F50243	DryMax® STERIL Maxi mit Fixierband Saugleistung: Bis zu 6 l Wasser oder 2,4 l Kochsalzlösung	720 x 370	80 Stück (2x40)
F50161	DryMax® STERIL Midi Saugleistung: Bis zu 4 l Wasser oder 1,6 l Kochsalzlösung	560 x 370	100 Stück (2x50)
F50163	DryMax® STERIL Midi mit Fixierband Saugleistung: Bis zu 4 l Wasser oder 1,6 l Kochsalzlösung	560 x 370	100 Stück (2x50)

Wir sind für Sie da!



+49 5606 53060-0



www.tapmed.de



+49 5606 53060-44



info@tapmed.de

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen · Tel. 05606 53060-0 · Fax 05606 53060-44