



Druckentlastung und Patientenpositionierung



Dekubitusprophylaxe beginnt vor der OP

Sehr geehrte Kunden, liebe Healthcare-Spezialisten,

während der Operation ist der Körper besonders starken Druckbelastungen ausgesetzt. Durch oft stundenlange gleiche Positionierung oder aufgrund von Scherkräften entwickeln Patienten vielfach Druckgeschwüre, die in der Tiefe entstehen und erst nach Tagen sichtbar werden. Eine fachgemäße Lagerung von Patienten im Operationssaal ist daher sowohl aus medizinisch-pflegerischer Sicht als auch aus Kostengründen sehr wichtig.

In diesem Katalog stellen wir Ihnen u. a. das Produktsortiment der irischen Firma Trulife vor - ein internationaler Spezialist für Lagerungshilfen im Operationssaal, mit dem wir schon viele Jahre erfolgreich zusammenarbeiten. Doch selbst wenn Sie in diesem umfangreichen Angebot nicht fündig werden, können wir Ihnen sicherlich mit anderen Lösungen weiterhelfen. Als führender Anbieter von Produkten für die Dekubitusprophylaxe und Patientenpositionierung im OP verfügen wir über ein breites Sortiment, das auch andere Hersteller einschließt. Wir unterstützen Sie selbst bei schwierigen Fällen oder Problempatienten kompetent.

Gerne demonstrieren wir Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten vor Ort. TapMed organisiert auf Wunsch maßgeschneiderte Workshops und Schulungen, in denen unsere Fachkräfte die Handhabung sowie die Einsatzgebiete von Lagerungshilfen erläutern. Rufen Sie uns an.

Ihr TapMed Team

TapMed 

Wir sind für Sie da!



05606 53060-0



www.tapmed.de



05606 53060-44



info@tapmed.de



Außendienstmitarbeiter vor Ort

Rev. 01 / 02-2020

Dekubitusprophylaxe
& Produktpalette

Seite 4-5

**Dekubitus-
prophylaxe**

OP-Tischauflagen

Seite 6-9

**OP-Tisch-
auflagen**

Kopf- und
Nackenschutz

Seite 10-15

**Kopf- und
Nackenschutz**

Arm- und
Ellenbogenschutz

Seite 16-19

**Arm- und
Ellenbogenschutz**

Spezialpolster

Seite 20-21

Spezialpolster

Körperschutz

Seite 22-27

Körperschutz

Bein- und
Knieschutz

Seite 28-29

**Bein- und
Knieschutz**

Fuß- und
Fersenschutz

Seite 30-33


**Fuß- und
Fersenschutz**

Allgemeine
Informationen

Seite 34-35

**Allgemeine
Informationen**

Dekubitusprophylaxe

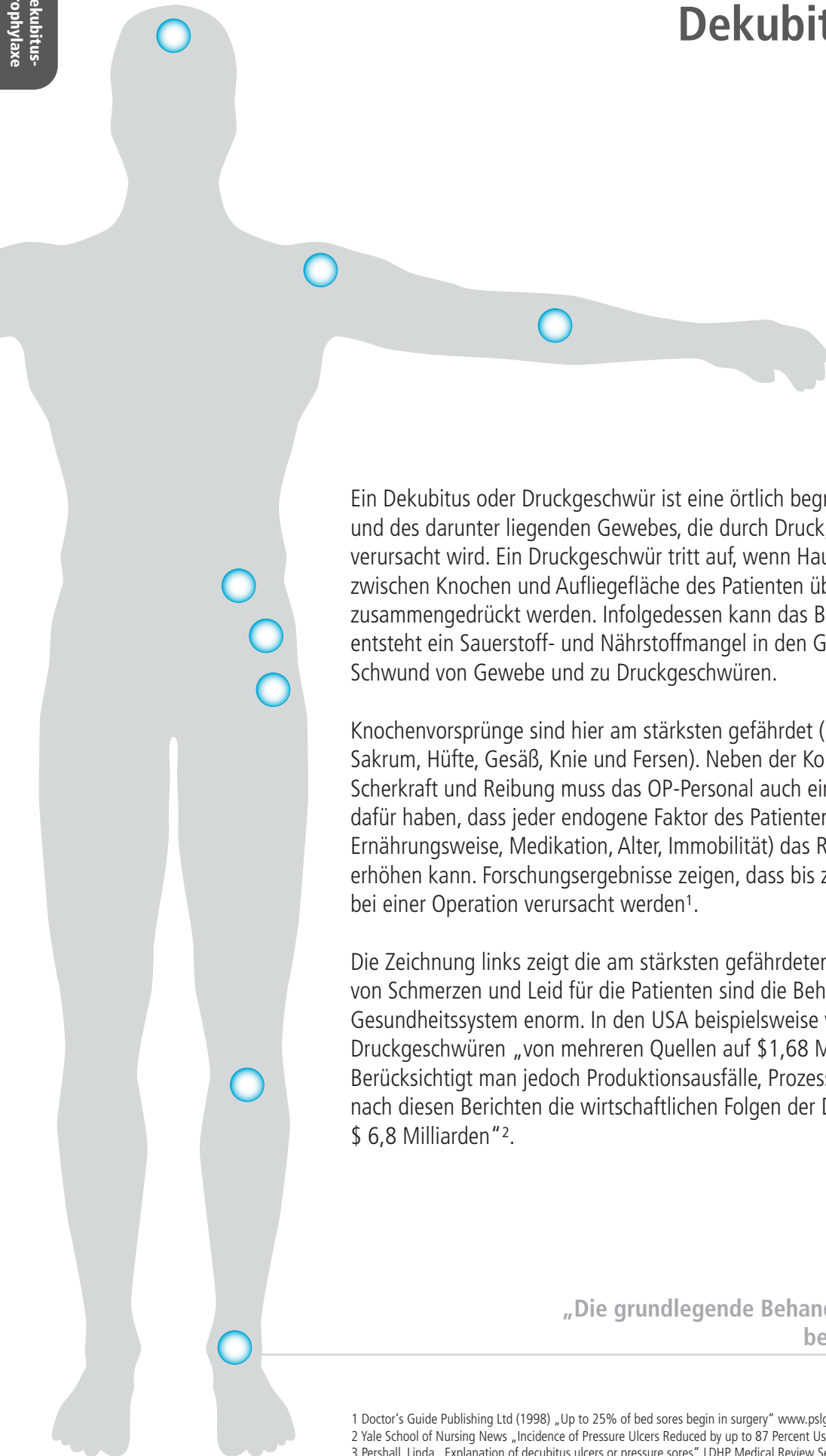

Ein Dekubitus oder Druckgeschwür ist eine örtlich begrenzte Schädigung der Haut und des darunter liegenden Gewebes, die durch Druck, Scherkräfte und/oder Reibung verursacht wird. Ein Druckgeschwür tritt auf, wenn Haut und Hautuntergewebe zwischen Knochen und Auflagefläche des Patienten über einen gewissen Zeitraum zusammengedrückt werden. Infolgedessen kann das Blut nicht zirkulieren und es entsteht ein Sauerstoff- und Nährstoffmangel in den Gewebezellen. Dies führt zum Schwund von Gewebe und zu Druckgeschwüren.

Knochenvorsprünge sind hier am stärksten gefährdet (Kopf, Schultern, Ellbogen, Sakrum, Hüfte, Gesäß, Knie und Fersen). Neben der Kontrolle der Faktoren Druck, Scherkraft und Reibung muss das OP-Personal auch ein geschärftes Bewusstsein dafür haben, dass jeder endogene Faktor des Patienten (Ernährungszustand und Ernährungsweise, Medikation, Alter, Immobilität) das Risiko für Gewebeschäden weiter erhöhen kann. Forschungsergebnisse zeigen, dass bis zu 25 % aller Druckgeschwüre bei einer Operation verursacht werden¹.

Die Zeichnung links zeigt die am stärksten gefährdeten Körperpartien. Abgesehen von Schmerzen und Leid für die Patienten sind die Behandlungskosten für das Gesundheitssystem enorm. In den USA beispielsweise werden die Kosten von Druckgeschwüren „von mehreren Quellen auf \$1,68 Milliarden oder mehr geschätzt. Berücksichtigt man jedoch Produktionsausfälle, Prozessurteile etc., dann erreichen nach diesen Berichten die wirtschaftlichen Folgen der Dekubitalulzera pro Jahr \$ 6,8 Milliarden“².

„Die grundlegende Behandlung eines Dekubitalulzerus besteht in seiner Prävention.“³

1 Doctor's Guide Publishing Ltd (1998) „Up to 25% of bed sores begin in surgery“ www.pslgroup.com/dg/6158A.htm
 2 Yale School of Nursing News „Incidence of Pressure Ulcers Reduced by up to 87 Percent Using Skin Care Prevention Systems“, (November 7th 2001)
 3 Pershall, Linda „Explanation of decubitus ulcers or pressure sores“ LDHP Medical Review Services Corporation: www.ldhpm.com

OASIS PLUS - Beste Druckentlastung durch 100 % Silikon



Ohne Polyurethanfolie. Extrem haltbar.

Die Oasis Plus Produktpalette sorgt mit ihrer Anti-Rutsch-Oberfläche, sowie ihrer anatomischen Form, für eine äußerst stabile Lagerung. Die Polster dieser Serie sind einfach zu reinigen und 30 % leichter als vergleichbare Produkte. Oasis Plus Produkte sind autoklavierbar.

AZURE - Dekubitusprophylaxe neu definiert



Bei der Produktreihe Azure besteht jedes Produkt aus zwei unabhängigen Gelschichten (Trugel und Ultrasoftgel), die ihre Wirkung in der Kombination entfalten. Die anatomisch geformten Polster bieten eine effektive Anpassung an den Körper des Patienten. Dadurch wird ein wirksamer Schutz vor Nerven-, Haut- und Gewebeschäden erreicht. Die Intention für Azure lag in der Schaffung eines Produktes, das in seiner Wirkung einer zusätzlichen Schutzschicht aus Gewebe und Haut nachempfunden ist. Azure hat für die Dekubitusprophylaxe im OP einen völlig neuen Standard gesetzt.

OASIS ELITE - Geringes Gewicht und hervorragende Druckentlastung



In der Oasis Elite Produktreihe wird Memory-Schaum mit Silikongel (Trugel) kombiniert. So wird zur Druckentlastung und zum Schutz des Patienten im OP eine hervorragende Qualität erzielt. Zur Anpassung an die Körperform des Patienten und zur Gewichtsverteilung wirken Schaummaterial und Gel zusammen. Oasis Elite Produkte sind mehr als 50 % leichter als vergleichbare reine Gelprodukte. Sie leisten nicht nur eine sehr gute Druckentlastung sondern ermöglichen darüber hinaus eine einfache Handhabung. Oasis Elite Produkte erfüllen alle Anforderungen für die spezifischen Lagerungen bei allen wichtigen chirurgischen Verfahren. Die Produkte sind vielseitig einsetzbar, leicht und bieten dennoch eine ausgezeichnete Stabilität.

OASIS - Die Originallösung in Silikon - Trugel




Die Oasis Produktpalette besteht aus einer umfangreichen Serie wiederverwendbarer Gelpolster und Lagerungshilfen aus 100 % Silikongel (Trugel). Sie bieten dem Patienten bei allen Operationsverfahren wirksamen Schutz und Komfort. Dies ist die erste Produktreihe, die Trulife für den OP-Bereich entwickelt hat.

OP-Tischauflagen

OASIS PLUS Tischpolster



Diese OP-Tisch-Auflage wird zur sicheren Lagerung des Patienten eingesetzt.
Gute Druckentlastung durch leichtes Würfelprofil.
Die OP-Tisch-Auflage ist rutschhemmend.
Die Oasis Plus Polster sind autoklavierbar.

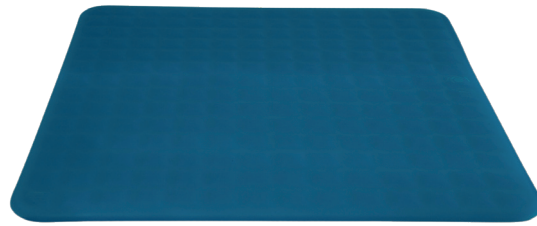


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OP041	Tischpolster, klein	520 x 520 x 10

AZURE Körperprotector



Azure Körperprotectoren verbinden ultraweiches, leichtes Silikongel in der unteren Schicht mit gehärtetem Silikongel in der oberen Schicht, um den Körper während der Operation abzupolstern. Die Auflagen sind bis zu 20 % leichter als vergleichbare Gel-Auflagen.

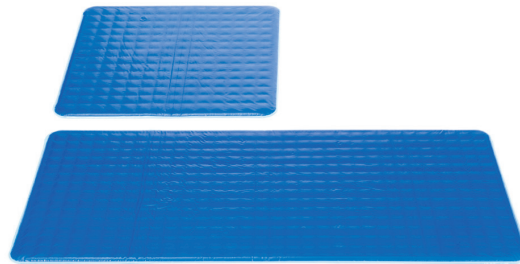


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ610	Körperprotector, klein	520 x 520 x 10
AZ611	Körperprotector, mittel $\frac{3}{4}$ -Länge	1150 x 520 x 10

OASIS ELITE OP-Tischauflage



Oasis Elite OP-Tischauflagen können zum Schutz des Körpers bei allen Operationen verwendet werden. Die ultraleichten Auflagen bestehen aus einer Schaumstoffbasis mit einer Gelschicht darüber. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung durch das OP-Personal.

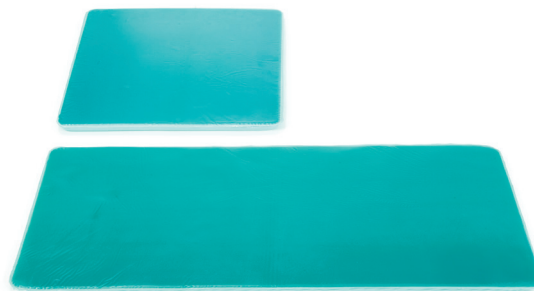


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL030	OP-Tischauflage, klein	520 x 520 x 30
EL031	OP-Tischauflage, mittel $\frac{3}{4}$ -Länge	1150 x 520 x 20

OASIS Standard OP-Tischauflage



Oasis Tischauflagen bieten Schutz auf der gesamten Oberfläche des Operationstisches und werden für den Einsatz bei Patienten in allen Positionierungen empfohlen. Die Auflagen sind flexibel, weich, bequem und vielseitig verwendbar. Sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und tragen so zur Dekubitusprophylaxe bei.

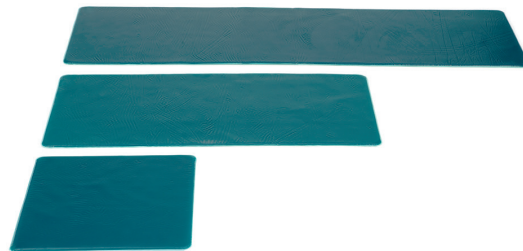


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA030	Standard OP-Tisch-Auflage, klein	520 x 520 x 10
OA031	Standard OP-Tisch-Auflage, mittel $\frac{3}{4}$ -Länge	1150 x 520 x 10
OA032	Standard OP-Tisch-Auflage, groß	1800 x 520 x 10

OASIS Würfelprofil-Auflage



Die Oasis Würfelprofil-Auflagen bestehen aus 30 mm² großen, erhabenen Trügel-Würfeln, die die Gesamtoberfläche der Tischauflage um 33 % vergrößern. Dieses einmalige Design erlaubt eine größere Gewichtsverteilung und ist bei langandauernden Operationen besonders sinnvoll.

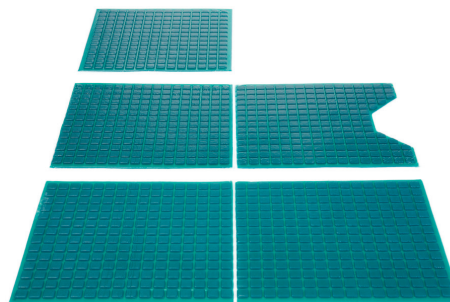


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA041	Würfelprofil-Auflage, klein	520 x 520 x 12
OA042	Würfelprofil-Auflage, mittel $\frac{3}{4}$ -Länge	1145 x 520 x 12

OASIS Kinder OP-Tischauflage



Diese Oasis Auflage wird zum Schutz pädiatrischer Patienten bei allen chirurgischen Verfahren verwendet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA033 	Kinder OP-Tischauflage	605 x 427 x 10

Die Oasis OP-Tischauflagen mit Sakralausschnitt bieten ausgezeichneten Schutz für den Sakralbereich – ein Bereich der höchsten Druckbelastung ausgesetzt ist. Sie sind unentbehrlich für alle Patienten in Steinschnittlage.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA037	OP-Tischaufage m. Sakralausschnitt, mittel	990 x 500 x 10
OA040	OP-Tischaufage m. Sakralausschnitt, klein	520 x 520 x 10

**Besuchen Sie uns im Internet:
www.tapmed.de**



Kopf- und Nackenschutz

OASIS PLUS Kopfpolster für die Rückenlage



Bei dem Oasis Plus Kopfpolster handelt es sich um ein anatomisch geformtes Kopf- und Nackenpolster. Übertreffende Druckentlastung wird durch Freilagerung des Hinterkopfes erreicht. 100 % Silikon ohne Polyurethanfolie, extrem haltbar. Die Oasis Plus Polster sind autoklavierbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OP151	Kopfpolster für die Rückenlage	220 x 264 x 66


Kopf- und
Nackenschutz

OASIS PLUS Anti-Rutsch-Disc



Die Oasis Plus Anti-Rutsch-Disc ist leicht zu reinigen, autoklavierbar und verhindert das Verrutschen von Polstern auf dem OP-Tisch.

Inhalt je VE 10 Stück.

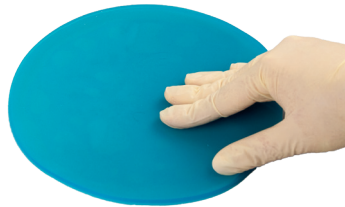

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OP015	Anti-Rutsch-Disc	Ø 200

AZURE Kopfprotector



Der Azure Kopfprotector zeichnet sich durch innovatives Design aus. Er passt sich bequem an die Kopfkonturen des Patienten an, während er gleichzeitig wirksamen Schutz für den Patienten bietet.





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ100	Kopfprotector	260 x 250 x 50

OASIS ELITE Kopfpolster für die Bauchlage



Die Oasis Elite Kopfpolster sind anatomisch geformt, so dass der Kopf bequem mit dem Gesicht nach unten ruhen kann. Das einzigartige Design sorgt für hervorragende Unterstützung, Stabilität und Schutz bei Operationen in der Bauchlage. Es sind Öffnungen zu beiden Seiten vorhanden zur Ausleitung der Beatmungsschläuche. Das Polster ist leicht, haltbar und einfach zu handhaben.

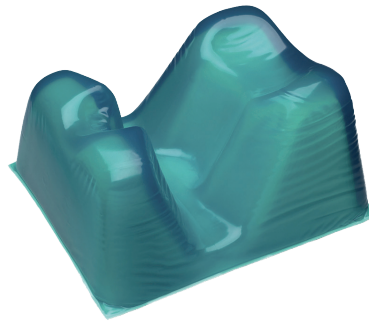



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL141	Kopfpolster für die Bauchlage, groß	280 x 235 x 150
EL142 	Kopfpolster für die Bauchlage, mittel	273 x 220 x 135

OASIS ELITE Kopfschale



Die Oasis Elite Kopfschalen für die Rückenlage sind ideal geeignet für die Lagerung des Patienten bei Augenoperationen und anderen OP-Verfahren in Rückenlage. Sie sind ergonomisch geformt zur stabilen Positionierung des Kopfes und bieten gleichzeitig wirksamen Schutz vor dem Entstehen von Druckgeschwüren.

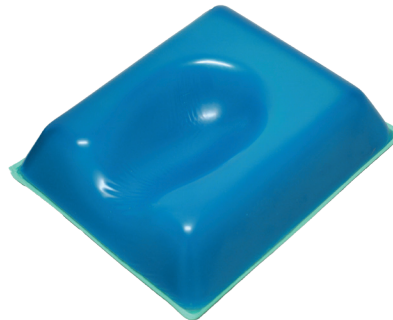

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL151	Kopfschale groß	275 x 237 x 90
EL152 	Kopfschale mittel	275 x 230 x 65

OASIS ELITE Kopfring, geschlossen



Mit der einzigartigen Kombination aus Gel und Schaummaterial passen sich diese Oasis Elite Kopfringe bequem an den Kopf des Patienten an. Sie sind für viele OP-Verfahren in Rückenlage geeignet.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL011 	Kopfring geschlossen, mittel	Ø 140 x 34
EL012	Kopfring geschlossen, groß	Ø 200 x 50

OASIS ELITE Kopfring, offen



Die Kombination aus Gel und Schaummaterial sorgt bei diesen Oasis Elite Kopfringen für Stabilität und Schutz des Kopfes des Patienten während der Operationen in Seitenlage.





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL021 	Kopfring offen, mittel	Ø 140 x 34
EL022	Kopfring offen, groß	Ø 200 x 54

OASIS Kopfring, geschlossen



Die geschlossenen Oasis Kopfringe bestehen aus reinem, weichem Silikongel und sind in mehreren Größen lieferbar. Sie schützen Kopf und Ohren bei vielen Operationen in Rückenlage.





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA010 	Kopfring geschlossen, sehr klein	Ø 90 x 40 x 20
OA011 	Kopfring geschlossen, mittel	Ø 140 x 35
OA012	Kopfring geschlossen, groß	Ø 200 x 75 x 45

OASIS Kopfring, offen



Die offenen Oasis Kopfringe sind weich und komfortabel. Sie schützen Kopf und Ohren des Patienten in Seitenlage und erlauben den einfachen Zugang zur Intubation während der Operation.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA020 	Kopfring offen, sehr klein	Ø 90 x 40 x 20
OA021 	Kopfring offen, mittel	Ø 140 x 60 x 35
OA022	Kopfring offen, groß	Ø 200 x 50

OASIS Stirnpolster



Das Oasis Stirnpolster schützt die Stirn des Patienten sicher vor Druck u. a. durch endotrachiale Schläuche.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA140	Stirnpolster	165 x 80 x 8

ET Schaumstoffkopfpolster



Kopfpolster aus viskoelastischem Schaumstoff. Hygienischer Vorteil: die Nähte sind verschweißt. Ein spezieller Filter verhindert das Eindringen von Keimen in das Innere des Kopfpolsters und erlaubt gleichzeitig den Luftaustausch.

Die seitlichen Führungen bieten Halt und Stabilität für den Kopf des Patienten.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
TR012	ET Schaumstoffkopfpolster	260 x 200 x 154

Anwendungsbeispiele im Kitteltaschen-Format

Patientenlagerung im OP



Fotobeispiele aus der Broschüre



Fordern Sie
Ihr kostenloses
Exemplar an.

Tel. 05606 53060-0

TapMed

Arm- und Ellenbogenschutz

OASIS PLUS Armauflagenpolster



Das ergonomisch geformte Oasis Plus Armpolster dient der sicheren Lagerung des ausgelagerten Armes. Hervorragende Druckentlastung und entspannte Lagerung durch leichte Vertiefung der Oberfläche. Die elastische Formgebung ermöglicht ein Einrollen des Polsters zum Stützen der Hand. Die Oasis Plus Produkte sind autoklavierbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OP070	Armauflagenpolster, kurz	395 x 134 x 10
OP101	Armauflagenpolster, lang	500 x 161 x 40

AZURE Armprotektor



Die Azure Armprotectoren passen sich der individuellen Form des Armes des jeweiligen Patienten an und wirken wie eine zweite Gewebeschicht. So bieten sie hervorragenden Schutz vor Nervenschäden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ200	Armprotektor, kurz	330 x 140 x 30
AZ201	Armprotektor, lang	460 x 180 x 35

OASIS ELITE Arm- und Kniepolster



Die Oasis Elite Arm- und Kniepolster mit erhöhten Seiten sind darauf ausgelegt bei vielen Operationen zusätzliche Unterstützung und Stabilität für den Arm zu gewährleisten.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL401	Arm- und Kniepolster, breit	510 x 150 x 35
EL402	Arm- und Kniepolster, mittel	400 x 150 x 35

OASIS ELITE Armauflagenpolster



Diese flachen Oasis Elite Armauflagenpolster haben eine leichte Vertiefung zur Aufnahme des Armes. Sie bieten eine wirksame Druckentlastung bei verschiedensten Operationen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL070	Armauflagenpolster, mittel	400 x 125 x 20
EL072	Armauflagenpolster, groß	600 x 125 x 20

OASIS Armauflagenpolster, konturiert



Dieses konturierte Oasis Armauflagenpolster wurde für den Einsatz auf einem Standard-Armausleger konstruiert. Mit seinen erhöhten Seiten bietet es ausgezeichneten Schutz und hält den Arm in Position.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA101	Armauflagenpolster, konturiert	510 x 150 x 35

OASIS Armauflagenpolster



Oasis Armauflagenpolster bieten den nötigen Schutz, wenn der Arm auf einem Armausleger gelagert wird. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA070	Armauflagenpolster, kurz, schmal	395 x 115 x 10
OA071	Armauflagenpolster, lang, breit	600 x 200 x 10
OA072	Armauflagenpolster, lang, schmal	600 x 125 x 10
OA073	Armauflagenpolster, sehr groß	590 x 390 x 10

OASIS Ulnaris-/ Brachialis-Nervenschutz



Der Oasis Ulnaris-/ Brachialis-Nervenschutz mit Klettverschluss ist für die Sicherheit der empfindlichen Ellenbogenregion unentbehrlich.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA061	Ulnaris-/ Brachialis-Nervenschutz, mittel	460 x 210 x 8
OA062	Ulnaris-/ Brachialis-Nervenschutz, groß	460 x 380 x 8

OASIS Armpolster für Armhalter



Dieses Oasis Armpolster wurde speziell für Armhalter aus Plexiglas / Acryl konstruiert. Einfache Einpassung mit Klettbefestigung.

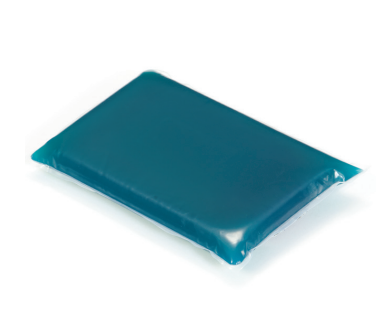

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA100	Armpolster für Armhalter	170 x 110 x 15

**Workshop oder Probestellung
jetzt buchen!**

Tel.: 05606 53060-0

Arm- und
Ellenbogenschutz

Spezialpolster

OASIS ELITE Trendelenburg System



Das Oasis Elite Trendelenburg System wurde entwickelt, um die Herausforderungen in der Trendelenburg-Lagerung zu bewältigen: Rutschen der Patienten, Schädigungen von Nerven und Entstehen von Dekubiti.



Artikel-Nr.	Bezeichnung
ELTS20	Trendelenburg System 20°
ELTS40	Trendelenburg System 40°

Positionierpolster



Universell einsetzbare, aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen gefertigte (Slow-Foam und Memory-Foam), leichte Positionierpolster. Die Nähte des latexfreien, hautfreundlichen Obermaterials sind ultraschallversiegelt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
ELP011	Positionierpolster Quader	330 x 230 x 50
ELP049	Positionierpolster Keil	250 x 200 x 10
ELP214	Positionierpolster Rolle	500 x 120


ARDS Polster-Set



Das ARDS Polster-Set wird zur Lagerung von Patienten in Bauchlage verwendet. Es besteht aus vier einzelnen Komponenten.

Die hochwertigen Schaumstoffpolster sind mit einem hautfreundlichen Obermaterial überzogen. Alle Nähte sind hygienisch ultraschall-verschweißt, außerdem erlaubt ein Hygiene-Filter den Luftaustausch. Krankheitserreger können nicht in die Schaumstoffpolster eindringen.

Die Komponenten des Sets werden ergonomisch unter dem Patienten angeordnet, damit eine optimale, druckentlastende Lagerung gewährleistet werden kann. Die Freilagerung des Abdomens erleichtert die Beatmung.

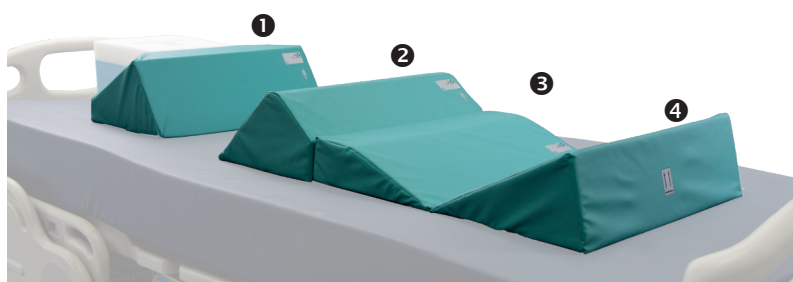

Artikel-Nr.	Bezeichnung
ELP200T	ARDS Polster-Set, 4-teilig für die Bauchlage

Die Produkte des Sets sind auch einzeln erhältlich:


ELP215	ARDS Brust-Polster	①
ELP216	ARDS Bauch-Polster	②
ELP217	ARDS Hüft-Polster	③
ELP218	ARDS Positionierpolster Keil	④

Körperschutz

Positionierpolster Prone Pad



Das Prone Pad erleichtert die Beatmung der Patienten während operativer Eingriffe in der Bauchlage bei gleichzeitiger Druckentlastung des Abdomens. Dieses Positionierpolster hilft die Entstehung von intraoperativen Dekubiti zu verhindern. Es ist gleichermaßen für männliche und weibliche Patienten geeignet.

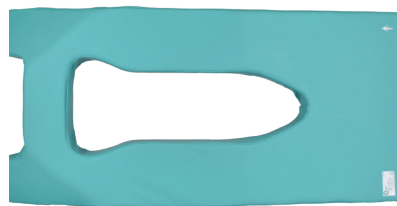


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
ELP914	Positionierpolster Prone Pad	1014 x 480 x 140

OASIS ELITE Körperpolster für die Bauchlage



Das Oasis Elite Körperpolster für die Bauchlage aus einer Gel- und Schaumstoffkombination wurde auf eine effektive Positionierung des Patienten bei Eingriffen in Bauchlage ausgelegt. Um optimalen Schutz zu erzielen, wird die Verwendung in Verbindung mit dem Kopfpolster für die Bauchlage (EL141) empfohlen.

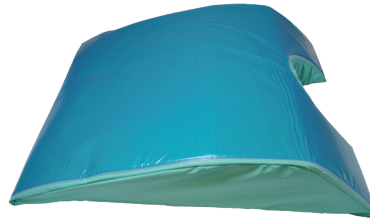

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL903	Körperpolster für die Bauchlage	610 x 530 x 130

OASIS ELITE Körperpositionierpolster



Dieses Oasis Elite Polster eignet sich sehr gut u.a. für die Wirbelsäulenchirurgie. Durch seine biegsame Unterseite, lässt sich der OP-Tisch mit Polster aufklappen. Es ist für XL-Patienten besonders geeignet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL904	Körperpositionierpolster Bauchlage	1115 x 520 x 140

OASIS ELITE Polster-Set für die Bauchlage



Das Oasis Elite Polster-Set für die Bauchlage bietet ultimativen Schutz durch Druckentlastung und effektive Positionierung in Einem. Für die bestmögliche Lagerung wird die Verwendung des Produkts in Verbindung mit dem Kopfpolster für die Bauchlage (EL141), dem Kniepolster (EL401) und einer Halbrolle (EL216) zum Anheben der Füße empfohlen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung
EL905	Polster-Set für die Bauchlage
EL906	Polster oben links oder unten rechts
EL907	Polster oben rechts oder unten links
EL908	Polster mitte links und rechts
EL912	Grundplatte

OASIS ELITE Lateral-Positionierhilfe (Parkbank)



Die seitliche Parkbank-Lagerung ist eine Variante der Seitenlagerung. Diese Lagerung ermöglicht dem Operateur einen besseren Zugang zur Fossa Cranii Posterior.

Dieser Oasis Elite Positionierer wird für die Neurochirurgie empfohlen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL913	Lateral-Positionierhilfe (Parkbank)	520 x 413 x 230

OASIS ELITE Lateral-Positionierhilfe



Dieses Oasis Elite Polster ermöglicht eine sichere Positionierung des Patienten in Seitenlage. Die unten liegende Schulter schmiegt sich in den integrierten Kanal ein, so dass außergewöhnlicher Komfort des Patienten und Schutz der Nerven gewährleistet sind. Die Lateral-Positionierhilfe wurde für den Einsatz bei Hüft-, Schulter- und Nierenoperationen konstruiert.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL900	Lateral-Positionierhilfe	720 x 500 x 160

OASIS ELITE Bein-Positionierpolster, lateral



Das Oasis Elite Tunnelpolster entlastet die Beine in Seitenlage optimal.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL800	Bein-Positionierpolster, lateral (Tunnel)	650 x 400 x 230

AZURE Sakralprotektor



Der Sakralbereich stellt ungeschützt ein erhebliches Risiko dar. Die Azure Sakralprotektoren wurden entwickelt, um in Rückenlage Halt zu geben, von Druck zu entlasten und sicher abzulagern.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ300	Sakralprotektor klein	400 x 380 x 25
AZ301	Sakralprotektor groß	450 x 445 x 30

AZURE Universal-Protektor



Dieses vielseitige, leichte Azure Polster kann bei einer Vielzahl von chirurgischen Verfahren zur Lagerung und zum Schutz des Patienten verwendet werden.

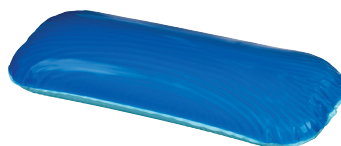


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ500	Universal-Protektor	425 x 155 x 60



Körperschutz

OASIS Universal-Positionierhilfe

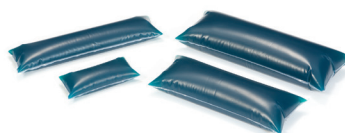

Diese Oasis Positionierhilfen aus 100 % Silikon sind für die sichere, effektive Lagerung bei allen operativen Eingriffen geeignet.






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA050 	Universal-Positionierhilfe, sehr klein	150 x 60 x 40
OA051 	Universal-Positionierhilfe, klein	330 x 70 x 50
OA052	Universal-Positionierhilfe, mittel	300 x 120 x 60
OA053	Universal-Positionierhilfe, groß	345 x 120 x 70

OASIS Halbrolle



Diese Oasis Halbrollen aus reinem Silikongel ermöglichen eine sehr gute Lagerung und Druckentlastung. Sie sind in mehreren Größen erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA208 	Halbrolle, sehr klein, schmal	150 x 80 x 50
OA209 	Halbrolle, sehr klein, mittel	200 x 80 x 50
OA210 	Halbrolle, sehr klein, breit	245 x 80 x 50
OA211	Halbrolle, schmal	305 x 95 x 75
OA212	Halbrolle, mittel	405 x 100 x 75
OA213	Halbrolle, breit	510 x 100 x 75

OASIS ELITE Halbrolle / Knierolle



Diese Oasis Elite Halbrollen bieten hervorragenden Schutz und Stabilität. Die einzigartige Kombination aus Gel und Schaummaterial bewirkt, dass sie bis zu 75 % leichter als vergleichbare Gelprodukte sind. Dies erlaubt eine einfache Handhabung durch das OP-Personal.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL210	Halbrolle / Knierolle, flach	350 x 150 x 75
EL214	Halbrolle / Knierolle, schmal	300 x 140 x 110
EL215	Halbrolle / Knierolle, mittel	400 x 140 x 110
EL216	Halbrolle / Knierolle, breit	505 x 140 x 110
EL217	Halbrolle / Knierolle, mittel, hoch	405 x 150 x 150
EL218	Halbrolle / Knierolle, breit, hoch	510 x 150 x 150

OASIS Extremitätengurt



Die Oasis Extremitätengurte werden bei vielen Operationen eingesetzt, um Arme und/oder Beine zu schützen. Sie bieten zusätzliche Sicherheit für den Patienten auf dem Operationstisch. Durch das Gelpolster werden Haut und Gewebe des Patienten entlastet.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA113	Extremitätengurt, 1 Paar	315 x 45 x 8

OASIS Positioniergurt mit Clipverschluss



Der Oasis Positioniergurt mit Clipverschluss gewährleistet Stabilität und Sicherheit des Patienten auf dem Operationstisch. Das integrierte Gelpolster schützt den Patienten. Mit Hilfe des Spezialverschlusses lässt sich der Gurt problemlos für jeden Tisch passend einstellen.

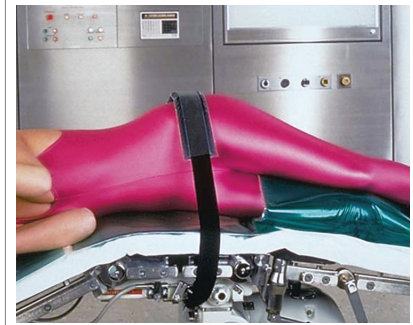

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA110	Positioniergurt mit Clipverschluss	505 x 85 x 8

Bein- und Knieschutz

AZURE Beinprotektor



Der Azure Beinprotektor bietet umfassenden Schutz für die Fersen- und Beinregion. Der Beinprotektor steigt hinter dem Knie leicht an; so bietet er Schutz für den Nervus fibularis und passt sich an das Bein hervorragend an. Positionierung, Schutz und sichere Lagerung sind die Schlüsselmerkmale dieses einzigartigen Produkts.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ400	Beinprotektor	515 x 180 x 40

AZURE Protektor für die Beinschale



Dieser Azure Protektor für die Beinschale wurde zum Schutz der Nerven und Blutgefäße im Bein bei Operationen in Steinschnittlage entwickelt. Die doppellagigen Protektoren sind leicht und flexibel; sie schützen vor Scherkräften und Nervenschäden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ410	Protektor für die Beinschale, 1 Paar	370 x 205 x 25

OASIS ELITE Arm- und Kniepolster



Die Oasis Elite Arm- und Kniepolster werden bei Operationen in Bauchlage zur Positionierung der Knie verwendet. Sie schützen vor Druckbelastung und Nervenschädigungen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL401	Arm- und Kniepolster, breit	510 x 150 x 35
EL402	Arm- und Kniepolster, mittel	400 x 150 x 35

Bein- und
Kniechutz

OASIS Universalpolster



Die Oasis Universalpolster passen u. a. in alle handelsüblichen Beinschalen. Sie sind in mehreren unterschiedlichen Größen lieferbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA090	Universalpolster, klein, 1 Paar	320 x 220 x 10
OA091	Universalpolster, mittel, 1 Paar	395 x 245 x 10
OA092	Universalpolster, groß, 1 Paar	520 x 300 x 10

Fuß- und Fersenschutz

OASIS PLUS Fersenpolster



Die Oasis Plus Fersenpolster bestehen aus 100 % Silikon ohne Folienüberzug. Für eine stabile Lagerung und einen sicheren Halt auf dem OP-Tisch sorgt die Anti-Rutsch-Oberfläche. Die Oasis Plus Produkte sind autoklavierbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OP132	Fersenpolster	127 x 162 x 71

AZURE Fersenprotektor



Im Fersenbereich besteht bei jedem operativen Eingriff ein extremes Risiko. Es sollte besonders sorgfältig auf die Vermeidung von Schäden geachtet werden. Diese leichten Azure Protektoren bieten der Ferse Schutz sowie Stabilität und Stützung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
AZ401	Fersenprotektor, 1 Paar	190 x 175 x 30

OASIS ELITE Fersenpolster



Oasis Elite Fersenpolster bieten Unterstützung und maximalen Schutz für die Fersen, auch während langer Operationen. Sie stützen den Achillesbereich und entlasten die Fersen effektiv. Das Produkt ist leicht im Gewicht und einfach in der Handhabung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
EL130	Fersenpolster, 1 Paar	180 x 100 x 70

OASIS Fersenpolster



Diese Oasis Polster aus 100 % Silikongel sind für alle Operationen in Rückenlage geeignet. Die Fersen werden effektiv vor Druckschäden geschützt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA130	Fersenpolster, 1 Paar	190 x 100 x 70

OASIS Fersenkappen



Oasis Fersenkappen sind dafür ausgelegt, die Fersen des Patienten von Druck zu entlasten. Sie sind für den Einsatz während und nach den meisten chirurgischen Verfahren geeignet und können auch bei bettlägerigen Patienten eingesetzt werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA131	Fersenkappen, 1 Paar	105 x 90 x 43

OASIS Fersen- und Knöchelschutz



Diese einzigartigen Oasis Polster sind so gestaltet, dass sie Ferse und Knöchel wie ein Schuh umschließen; sie werden mit Klettband befestigt. Sie polstern und schützen die Ferse, wenn sich der Patient in Rücken- oder Seitenlage befindet. Sie können auch als Schutz für Knöchel und Fuß beim Einsatz von Beinschalen und Steigbügelfußschlaufen verwendet werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
OA200	Fersen- und Knöchelschutz, 1 Paar	250 x 120 x 10

Mehr Wissen schafft Patientensicherheit

TapMed akademie

In unseren Workshops und Schulungen demonstrieren unsere kompetenten Schulungsleiter den praxisnahen Umgang mit aktuellen Lagerungs- und Hilfsmitteln.



Wir erstellen gerne einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungsplan.

Rufen Sie an: 05606 53060-0

Allgemeine Hinweise zur Produktverwendung

Jedes Produkt der Trulife Produktserie zur Dekubitusprophylaxe wurde strengsten Haltbarkeitstests unterworfen, um sicherzustellen, dass es der Benutzung auch im hektischsten OP stand hält. Bereits in der Konstruktionsphase werden aufwändige Belastungstests durchgeführt.

Die Trulife Produktserie besteht aus der umfangreichsten Palette an Gelpolstern und Lagerungshilfen, die derzeit verfügbar ist. Die Polster sind bei praktisch jedem Operationsverfahren einsetzbar. *

Die Produkte werden nach strengen ISO 9001:2000 Standards hergestellt und tragen das CE-Zeichen.

Wie können die Produkte gereinigt werden?

Alle Produkte lassen sich mit Standardreinigungsmitteln für den OP einfach reinigen (Wischdesinfektion). Bitte nicht über einen längeren Zeitraum einweichen; OASIS PLUS ist zudem auch autoklavierbar.

Können die Produkte im direkten Kontakt mit der Haut des Patienten verwendet werden?

Alle Produkte sind latexfrei und nicht allergen. Bei dem in den Produkten verwendeten Gel handelt es sich um ein gehärtetes Silikon, das nicht fließt. Dies ist ein inertes Material, das ein Bakterienwachstum nicht unterstützt. Die Verwendung der Polster direkt auf der Haut ist daher unbedenklich.

Können die Produkte erwärmt oder gekühlt werden?

Die Produkte können bis auf -12 °C gekühlt werden. Da die Haftwirkung von Klettband durch niedrige Temperaturen abgeschwächt werden kann, sollte man Produkte mit Klettband vor der Verwendung wieder auf Raumtemperatur erwärmen.

Die Polster können bei Bedarf auf maximal 50 °C erhitzt werden; ihr Einsatz in Verbindung mit Patientenwärmesystemen ist sicher.

Sind die Polster röntgenstrahlendurchlässig?

Tests zeigen eine 89,7%ige Durchlässigkeit von Röntgenstrahlen. KST- und CAT-Aufnahmen wurden bereits mit angelegten OASIS-Produkten erstellt. AZURE-Polster sind bei Einstellung folgender Werte röntgenstrahlendurchlässig: 102 – 141 mA, 70 kv und 2,8 – 3,6 ms.

Was passiert bei einem Schnitt in das Produkt?

Die Reparatur eines kleinen Einschnittes ist mit dem Reparatur-Set (OA005) möglich (betrifft Produkte der Serien: AZURE, OASIS ELITE und OASIS). Bei einem Schnitt in das Produkt wird jedoch dringend empfohlen, das Polster zu entsorgen, um das Risiko einer Keimübertragung zu vermeiden.

OASIS PLUS Produkte können bei einer Oberflächenverletzung sicher weiter verwendet werden, solange eine ordnungsgemäße Reinigung gewährleistet ist.

Besteht für die Produkte eine Garantie?


Für alle Produkte besteht eine zweijährige Garantie auf herstellungsbedingte Mängel.

* Allein die für die Patientenlagerung verantwortlichen Personen können im Einzelfall über die sichere und fachgerechte Form der Lagerung entscheiden. Alle hier gezeigten Lagerungen sind daher unverbindlich und dienen nur der Demonstration der Produkte.

Legende

 CE - zertifiziert	 Röntgenstrahlendurchlässig
 Geeignet für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen	 Latexfrei
 Autoklavierbar	

**Kongresse - die Chance für ein persönliches Kennenlernen.
Scannen Sie den QR-Code für unsere Terminübersicht.**

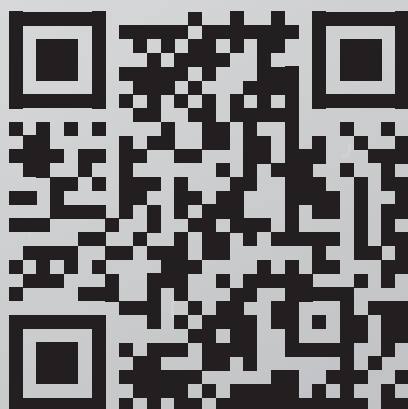

<https://www.tapmed.de/termine/>

Wir sind für Sie da!



05606 53060-0



05606 53060-44



Außendienstmitarbeiter
vor Ort



info@tapmed.de



www.tapmed.de

www.tapmed.de

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen · Tel. 05606 53060-0 · Fax 05606 53060-44